

## 取扱説明書

### 学童用シリーズ

BW-532T

BC-532T

BC-532C



- この取扱説明書にはご使用上の注意事項や操作方法が記載されています。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い下さい。
- お読みになった後も大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問合せください。



シーホネンス株式会社

使用目的・主要部の名称と説明	■使用目的 .....	2
	■主要部の名称と説明 .....	2
安全にお使いいただくために	■安全にお使いいただくための注意事項 .....	3～7
仕 様	■仕 様 .....	8
外 観 図	■外 観 図 .....	9
コンパクト収納ハンドル	■コンパクト収納ハンドルの名称 .....	10
	■コンパクト収納ハンドルの操作方法 .....	10
	■ベッド動作の説明 .....	10
脚ボトムの角度調節	■脚ボトムの角度調節の方法 .....	11
トータルロックキャスター	■トータルロックキャスターについて .....	11
対角ストッパーキャスター	■対角ストッパーキャスターについて .....	12
サイドレール	■サイドレールの特徴と使用方法 .....	12
マットレスの種類とご注意	■マットレスの種類とご注意 .....	13
日常のお手入れ	■日常のお手入れ .....	13
故障かな？と思ったら	■故障かな？と思ったら .....	13
日常の点検	■日常の点検 .....	14
長期保管について	■長期保管について .....	14
アフターサービスについて	■アフターサービスについて .....	14

## 使用目的／主要部の名称と説明


### 使用目的

このベッドは、児童が医療施設および療養施設での治療・療養に使用されることを目的に作られたベッドです。

### 主要部の名称と説明

〔トータルロックタイプの場合〕


BW-532T・BC-532T

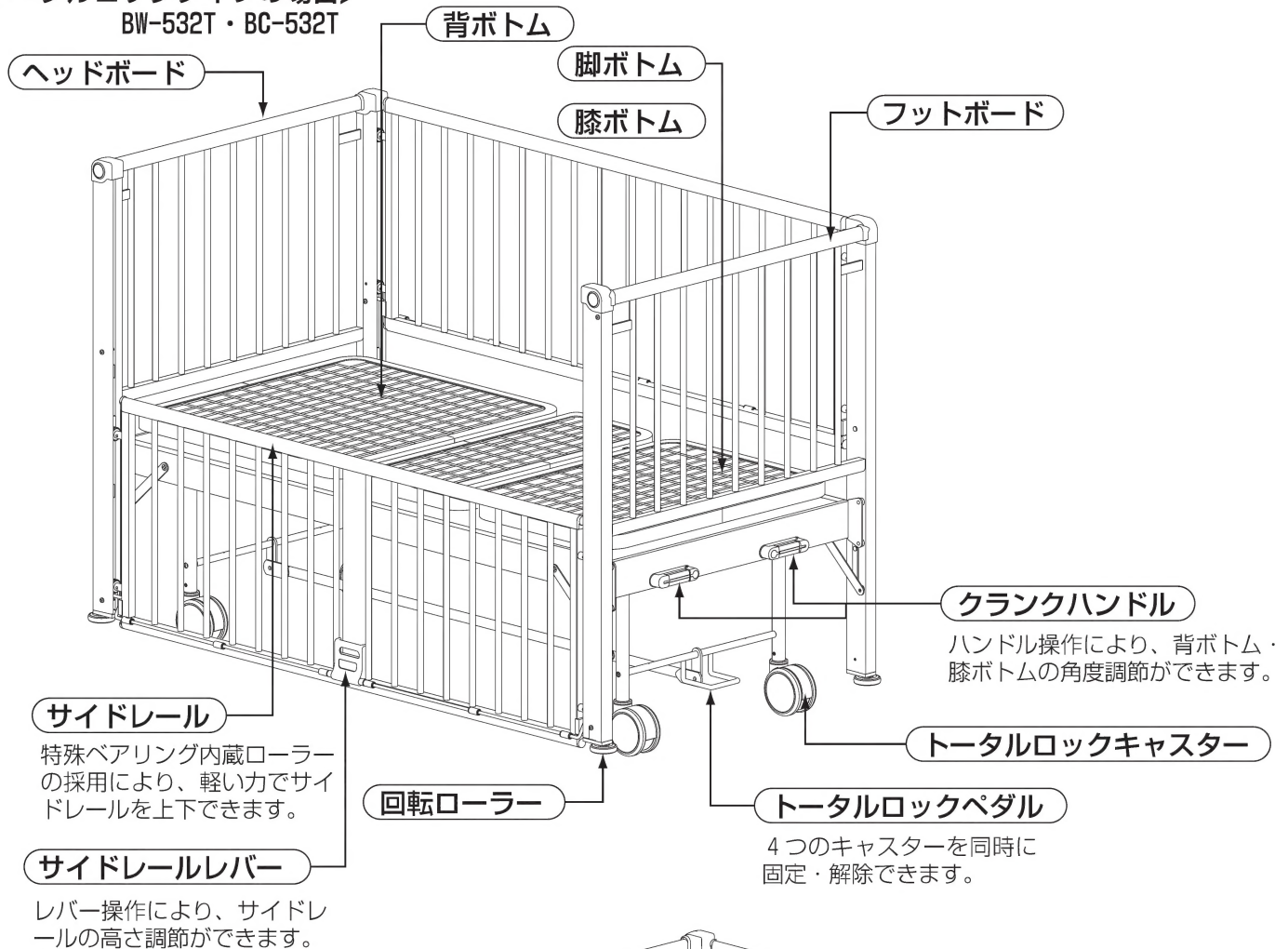

〔対角ストッパータイプの場合〕

BC-532C

※キャスター部分以外は、トータルロックタイプと同じです。

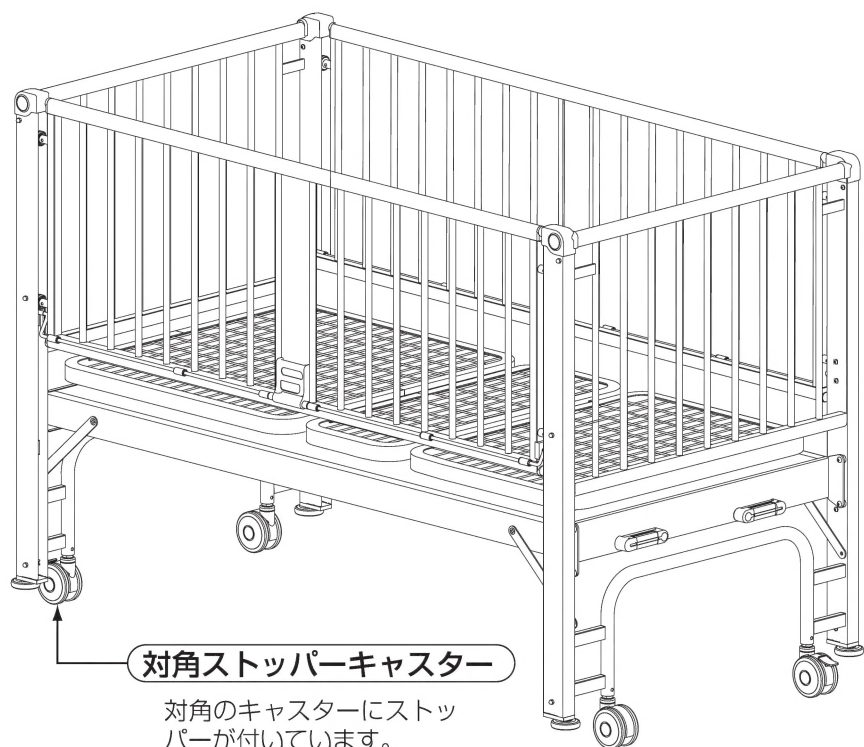

# 安全にお使いいただくために

## 必ずお読みください

必ずご使用前に『安全にお使いいただくために』をよくお読みになり正しくお使いください。

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

## 表示と絵表示について

説明書の内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



禁 止

危険性の程度とは関係なく品質保護、使用上の安全のための禁止行為を表しています。



警 告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



感電注意

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図中の中に具体的な注意内容（左の図の場合には『感電注意』）が描かれています。




分解禁止

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図中の中に具体的な禁止内容（左の図の場合には『分解禁止』）が描かれています。

## 警告ラベルについて

警告ラベル

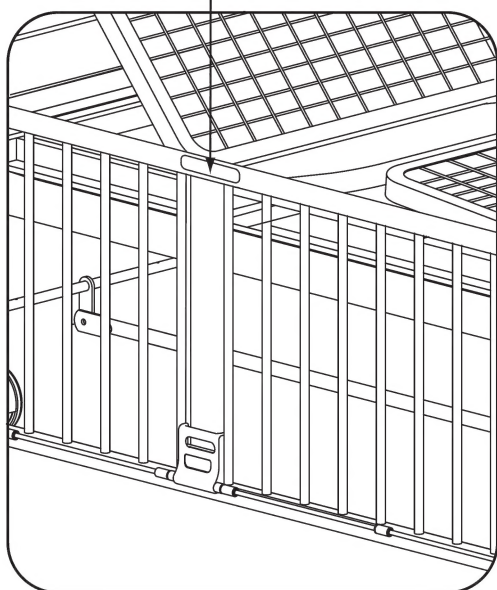

ベッドをお使いの方に対して、特に注意していただきたいことをラベルにして、サイドレールの上側外側に貼っています。



警 告

事故、破損、ケガをします。

警告ラベルは、はがしたり傷をつけたりしないこと。



## 安全にお使いいただくために

以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守ってください。守らなければ人が死亡、重傷を負う可能性が想定されます。

### ●挟まれ注意。




手や足を挟んでケガをします。ベッドの操作時には、頭や腕、足をベッドの外に出してサイドレールなどに挟まれたりしないように十分注意すること。特に布団をめくってみると足を挟み込んでいたなどのこともあるので介護される方にも十分注意が必要です。

### ●ベッド作動中は駆動部をさわらない。



ベッド作動中は、メインフレームや背ボトムの下に頭、腕や足を入れない。下がってきたメインフレーム、背ボトムで頭、腕や足を挟んだり、モーターやハンドルの可動部分でケガをする恐れがあります。患者さんはもちろんのこと介護される方にも十分注意が必要です。

### ●踏み台代わりにしない、ベッドの上で飛び跳ねない。

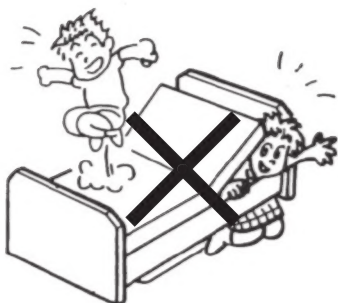

ベッドから転落、転倒してケガをしますので、ベッドを踏み台にしないでください。また、ベッドの上で飛び跳ねない。特にお子様には、ご注意ください。ケガや故障の原因になります。

### ●分解・改造はしないでください。



分解禁止

安全面や耐久性に支障をきたす恐れがありますので、分解したり、修理や改造は絶対にしないでください。ケガや故障の原因となります。



## 警告

以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守ってください。守らなければ人が死亡、重傷を負う可能性が想定されます。

### ●乳幼児には使用しないでください。


このベッドは、児童用の設計になっています。乳幼児が使用しますとヘッド・フットボードやサイドレール等のすきまにはさまったり、すきまから転落する可能性がありますので絶対に使用しないでください。

### ●ベッド内にもぐり込まない。



ベッドの下にもぐり込んだり、ベッド内に頭、腕や足を入れない。ベッドの可動部分（ボトムなど）とフレームやサイドレールとの間に頭、腕や足を挟んでケガをします。

### ●ブレーキは必ずかけてください。

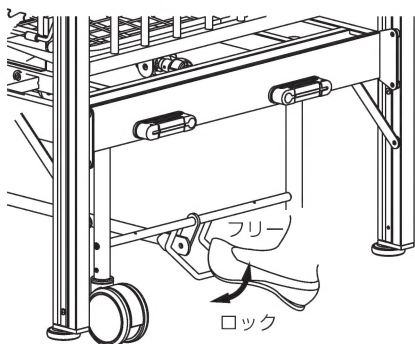

ベッドを移動するとき以外は、必ずブレーキ（ロック）をかけてください。ブレーキをかけないと患者さんがベッドに乗り降りする際に、ベッドが動いてケガをする恐れがあります。

### ●症状にあわせて使用してください。



患者さんあるいはご家族の方が直接ベッドを操作される場合は、医師や介護する方から症状にあった使用方法について十分説明を受けたうえで、ご使用ください。症状によっては、ベッドの操作が症状を悪化させる場合があります。また、うつ伏せに寝た状態でのベッドの作動は間接を逆に曲げることになりますので絶対に行わないでください。



## 注意

以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければ人がケガを負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

### ●一人用の設計です。



このベッドは一人用の設計になっています。  
二人以上では、ご使用になれません。

### ●上がっているボトムの上に乗らないでください。




上がっている背ボトムや脚ボトムの上に腰掛けないでください。ボトムの変形や破損の原因となります。

### ●火気に近づけないでください。




ベッドの近くでの、ストーブなど熱器具のご使用は、避けてください。変形、変質、発火等の原因となる場合があります。

### ●ベッドの下に物を置かないでください。

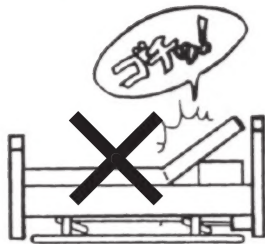

ベッドの高さ調節ができなくなります。また、下に置いた物をこわしたり、ベッドを変形させる恐れがあります。

### ●クランクハンドルは、回しすぎないでください。

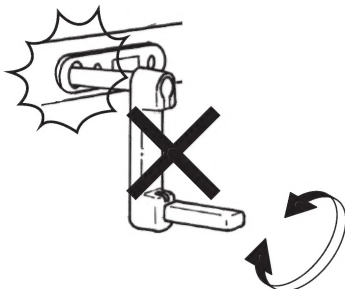

クランクハンドルで背ボトム・膝ボトムの操作をする場合は、回しすぎないように注意してください。回しすぎますと破損や故障の原因となります。





### 注 意

以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければ人がケガを負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

#### ●サイドレールを持って動かさないでください。



サイドレールを持ってベッドを移動させないでください。サイドレールに大きな力がかかり、変形や破損の原因となります。

#### ●被災したベッドは点検・修理を依頼してください。

火事・水害・地震等で被災したベッドは、お買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。電装品のショートや漏電による感電、火災やベッドの変形による動作の異常によってケガをする恐れがあります。また、ご使用中に万一故障、破損した場合はすぐに使用を中止し、販売店または弊社まで修理をご依頼ください。

#### ●他社製品とは組合せないでください。

ベッドに直接取り付けて使用するサイドレール、介助バー、マットレスなどのオプション品は、必ず弊社の適合品をお使いください。他社製品と組合わせるとベッドの故障やケガの原因となりことがありますので絶対に組合せないでください。

#### ●故障、破損したらベッドの使用をおやめください。

ご使用中に万一故障、破損した場合は直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。



# 仕 様

## 2 クランク学童用ベッドの仕様


	品名	学童用ベッドシリーズ		
	品番	BW-532T	BC-532T	BC-532C
寸法	全長	1765mm		
	全幅	1005mm(ボトム幅900mm)		
	全高	1300mm(ゆかからボトム面の高さ620mm)		
	サイドレール高さ (最上段位置)	1300mm(ボトム面からの高さ680mm)		
	サイドレール高さ (中間位置)	980mm(ボトム面からの高さ360mm)		
	サイドレール高さ (最下段位置)	680mm(ボトム面からの高さ60mm)		
	キャスター	車輪径125mm 双輪キャスター (トータルロック式)		車輪径100mm 双輪キャスター (対角ストッパー式)
材質	ベッド・フットボードの材質	ポリエチレン樹脂成形品および鋼管製		
	回転ローラーの材質	ポリエチレン樹脂製		
	ボトムの材質と表面処理	ワイヤーメッシュボトム 電着塗装および抗菌粉体塗装	ワイヤーメッシュボトム 抗菌粉体塗装	
	メインフレームの材質と表面処理	鋼板および鋼管 電着塗装および抗菌粉体塗装	鋼板および鋼管 抗菌粉体塗装	
背 上 げ	駆動方式	手動クランクハンドル		
	背上げ角度	0～75度(無段階)		
	電源			
	消費電力			
	連続使用時間			
	モーター形式			
膝 上 げ	駆動方式	手動クランクハンドル		
	膝上げ角度	0～45度(無段階)		
	電源			
	消費電力			
	連続使用時間			
	モーター形式			

## トータルロックタイプ

- 背上げ、脚上げをクランクハンドルで調節
- 車輪径125mmのキャスターを一つのペダルで4輪同時に固定・解除

フット側

(フットボード側よりみた図)

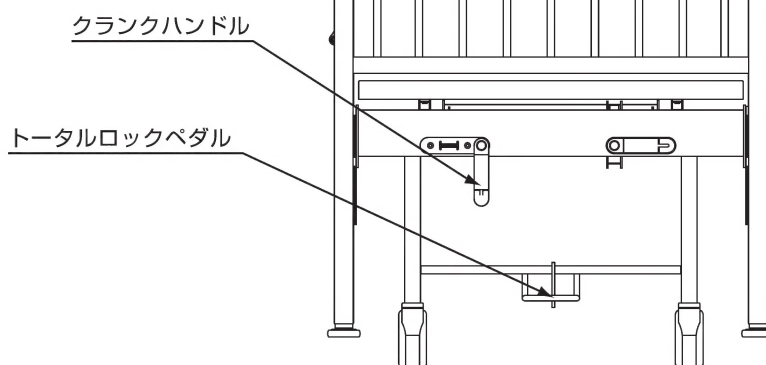


BW-532T・BC-532T

## 対角ストッパータイプ

- 背上げ、脚上げをクランクハンドルで調節
- 車輪径100mmのキャスターを対角のストッパーで固定・解除

フット側

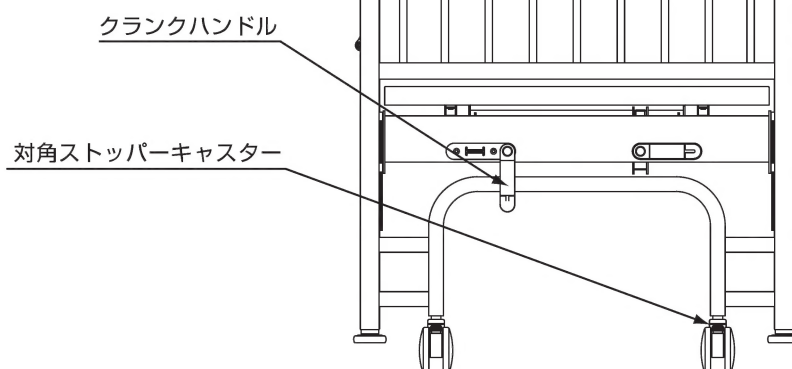


BC-532C


# コンパクト収納ハンドル

## コンパクト収納ハンドルの名称

- ハンドルはベッド本体に折りたたんで収納できます。収納時はフットボード面から出っ張らず、ベッド移動やベッド周りでの看護作業に邪魔になることはありません。
- ハンドルを収納する（使用後は必ず折りたたんで収納してください）とストッパーが自動的にかかり不用意にギヤッチ機構が動く心配がありません。

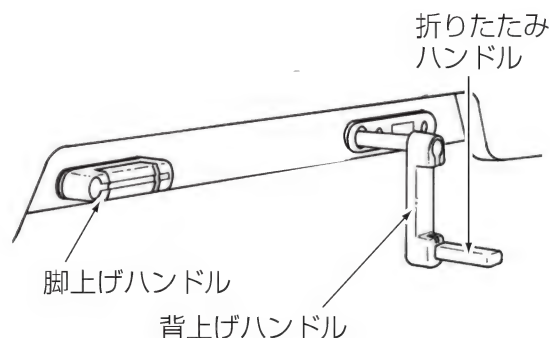

## コンパクト収納ハンドルの操作方法

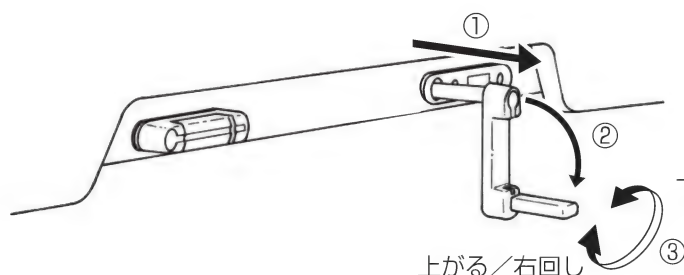

- ①ハンドル全体を手前に引き出します。
- ②折りたたみハンドルを倒します。
- ③矢印方法に回せば（あがる／右回し・下がる／左回し）で操作できます。




警告

### 事故、破損、ケガをします。

- 脚を引っ掛けたり転倒の可能性があるので、使用後は必ずハンドルを収納してください。
- 背ボトム、膝ボトムが上がりきる、また下がりきるとそれ以上回転させないので無理に回さないでください。

## ベッド動作の説明

### 背上げ調節

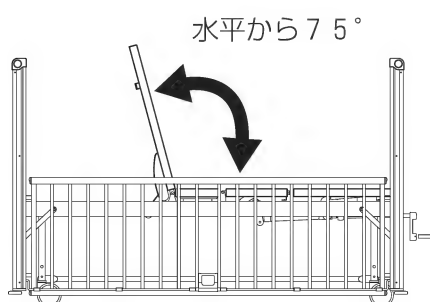


- 背上げクランクハンドルを操作して、背ボトムの角度を調節出来ます。  
水平から最大75度まで調節出来ます。

#### 使用方法

- ベッドから起き上がる時に便利です。
- ベッドでの読書・食事などに便利です。

### 膝上げ調節

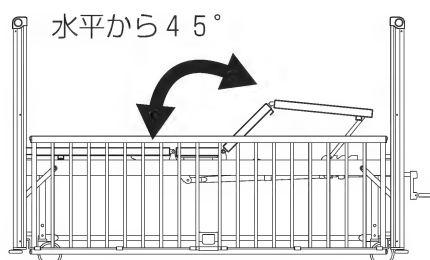

- 脚上げクランクハンドルを操作して、膝ボトムの角度を調節出来ます。  
水平から最大45度まで調節出来ます。

#### 使用方法


- 背上げを行う場合、先に膝ボトムを上げておくと体のずれが少なくなります。
- 体に負担がかからないように調節します。



# 脚ボトムの角度調節／トータルロックキャスター

## 脚ボトムの角度調節の方法

- 脚ボトムの角度を調節することができます。  
脚ボトムの保持金具を、手動で操作することにより  
3段階の角度に調節することができます。  
通常、脚ボトムの保持金具は①の位置にあります。  
②③への角度調節は膝ボトムが上がっているときに  
行ってください。

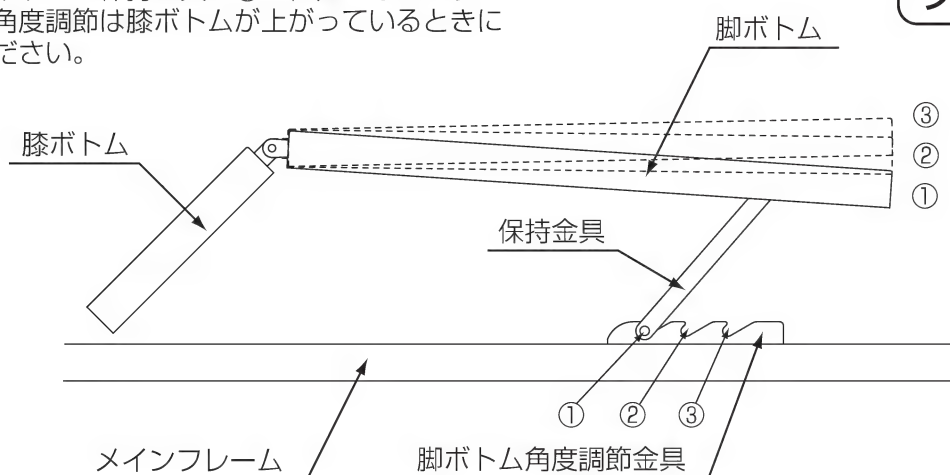

### 警告 事故、破損、ケガをします。

- 膝ボトムを水平の状態にするときは、脚ボトムを①の位置にしてから操作してください。
- 患者さんが寝たまま脚ボトムの角度を調節する場合は、ベッドの両側から二人で行ってください。脚ボトムとメインフレームのあいだに挟まれてケガをする恐れがあります。


## トータルロックキャスターについて

- トータルロックキャスターの操作ペダルはフット側の下方センターにあります。  
フット側の操作ペダルを踏み込むと4輪同時に、  
旋回と回転が固定されます。解除するときは、操作  
ペダルを押し上げると解除されます。


ヘッド側

操作ペダル

フット側

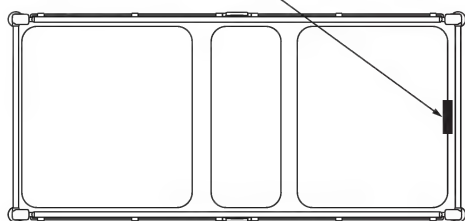

(ベッドを上から見た図)

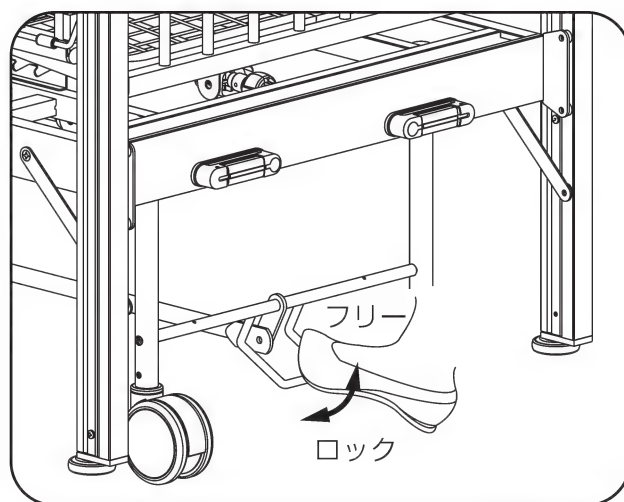

### 警告 事故、破損、ケガをします。


- 移動する際は必ず操作ペダルが上がっていることを確認してください。
- ベッド設置後は必ず操作ペダルを踏みこんでロックしてください。
- キャスターがロックされた状態でベッドを無理に動かしますと、故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。

# 対角ストッパーキャスター／サイドレールの特徴と使用方法


## 対角ストッパーキャスターについて

- 対角ストッパーキャスターのストッパーペダルは、ヘッドボード・フットボード側より向かって右側にあります。ストッパーペダルを踏み込むとロックされます。ロックを解除するときは、ストッパーペダルをつま先で押し上げてください。

- ストッパー付きキャスター
- ストッパーなしキャスター

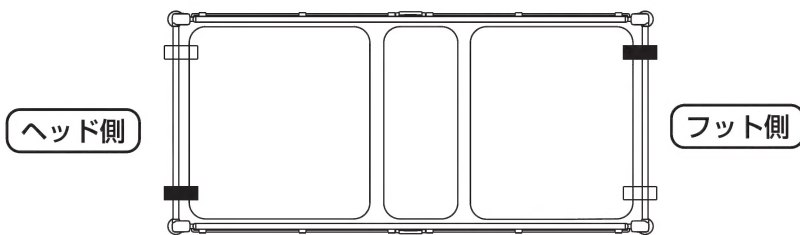

(ベッドを上から見た図)

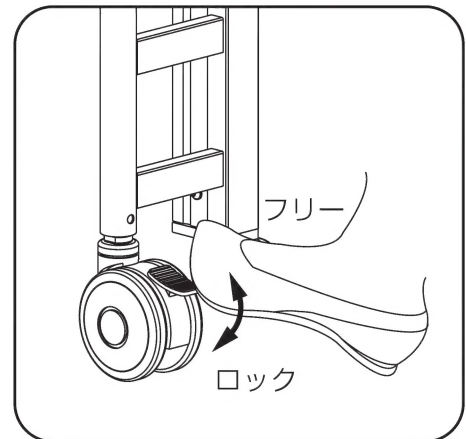

警告

### 事故、破損、ケガをします。

- 移動する際は必ずストッパーペダルが上がっていることを確認してください。
- ベッド設置後は必ずストッパーペダルを踏みこんでロックしてください。
- キャスターがロックされた状態でベッドを無理に動かしますと、故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。

## サイドレールの特徴と使用方法

- ベッド本体の両側にスライド式のサイドレールを設けています。3段階の高さ調節が可能です。アルミサッシュ製のレールと、ベアリング内蔵ローラーを使用していますので軽い力で上下することができます。


### 使用方法

#### ◆上げるとき◆

下がっているサイドレールを持ち、固定したい高さまで引き上げてください。自動的にストッパーがかかります。

#### ◆下げるとき◆

サイドレールレバーを軽く持上げてから、レバーを倒します。サイドレールを固定したい高さまで下げてください。

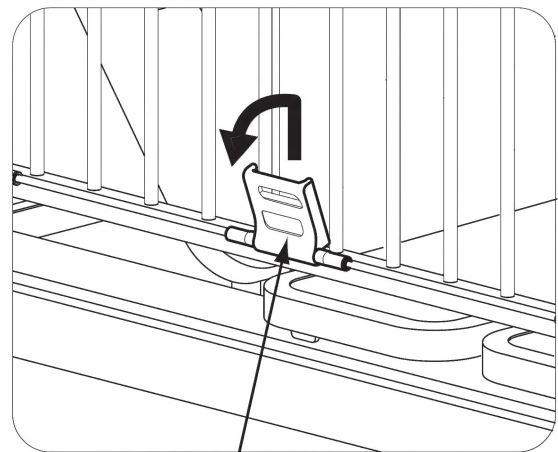

サイドレールレバー



警告

### 事故、破損、ケガをします。

- スライド式サイドレールは、ベッドで寝ている人の転落防止、寝具の落下防止を目的としています。立ち上がり時など、支えとしてお使いになるのは絶対におやめください。サイドレールに無理な体重をかけますと、急にサイドレールが下がって、思わぬケガをする恐れがあります。
- サイドレールのスライドレール部には、絶対に手や指を入れないでください。大変危険です。
- サイドレールレバーを操作する時は、必ず少し持上げてください。無理に操作しますと故障の原因となりますので、絶対に行わないでください。

# マットレスの種類／日常のお手入れ／故障かな？と思ったら

## ■ マットレスの種類とご注意

名 称	品 番
ダブルウェーブ マットレス	MB-2500L
ダブルウェーブデラックス マットレス	MB-2501L



注 意

### 事故、破損をします。

- このベッドには、必ず弊社製のマットレスを組み合わせてご使用ください。他社製のマットレスは、寸法や折れ曲がりの点で、適合しないだけでなく、ベッドに負担をかけ故障の原因になります。
- ウォーターベッドは、適合しません。

## ■ 日常のお手入れ

- 拭き掃除をする場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って行ってください。
- その後、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 洗剤液を使用する場合は下記の薬品を指定の濃度に薄めてご使用ください。  
塩化ベンザルコニウム液(オスバン) 0.05%～0.2%  
塩化ベンゼトニウム液(ハイアミン) 0.05%～0.2%  
クロルヘキシジン液(ヒビデン) 0.05%



警 告

### 必ず水で薄めた中性洗剤を使うこと。

揮発性のもの(シンナー、アルコール、ベンジン、アセトン、クレゾール)などは、絶対に使用しないこと。本体が変色したり、塗装がはげたりします。

## ■ 故障かな?と思ったら。

- 故障でない場合がありますので、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしてください。  
それでも直らない場合は、ベッドの使用を中止して、販売店に修理をご依頼ください。

症 状	チ ェ ッ ク	処 置
ボトムが上がらない。	ベッド周辺、可動部に 障害物はありませんか？	障害物を取り除いてください。
ベッドの移動が 出来ない。	キャスターがロックされて いませんか？	キャスターのロックを解除して ください。
サイドレールが 下がらない。	サイドレールのレバーがロック されていませんか？	サイドレールレバーをフリー の状態にしてください。



## 日常の点検

点 検 項 目	異常なし	異常あり
●スライド式サイドレールは、上下しますか。		
●スライド式サイドレールのレバーは、ロック・解除しますか。		
●クランクハンドルは、背上げ・膝上げしますか。		
●クランクハンドルは、収納されていますか。		
●キャスターは、ロックされていますか。		
●可動部分から異常音がしませんか。		
●ネジ・ボルト等は、外れていませんか。		

## 長期保管について

- 背ボトム、膝ボトムを水平の位置まで下ろしてください。
- ベッドの上にはマットレス以外のものを乗せないでください。
- マットレスの上には何も乗せないでください。（マットレスの上にものを乗せたままにしますとマットレスが変形する場合がありますのでおやめください。）
- 高温、多湿、ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- ベッドは水平の状態で保管してください。

## アフターサービスについて

- このベッドには保証書を添付しています。[販売店・購入日]などの記入事項をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げから1ヵ年間です。
- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよく読みください。それでも異常のある場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。
  - ◆保証期間中◆
    - ①品名・品番 ②お買い上げ日 ③故障・異常内容（詳しく） ④施設名・ご氏名・ご住所・電話番号
  - ◆保証期間が過ぎているとき◆
 お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。
- 弊社では、ベッドの補修部品（商品の機能を維持する部品）の最低保有期間を製造打ち切り後6年としております。
- アフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店にご相談ください。

修理・お取り扱いお手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店、  
レンタル取次店へお申し付けください。

【カスタマーサポートお問い合わせ窓口】

無 料 ツーワ

**FreeCall 0120-20-1001**

10月1日は福祉用具の日



**シーホネンス株式会社**

〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目10番17号 TEL (06) 6981-3432

© 2005 SEAHONENCE INC. (シーホネンス株式会社) All Rights Reserved.